



LookinBody120

Data Management Software

설치안내

Installation Guide

Installation Guide **USA**

インストール案内

安装指南







LookinBody120

Data Management Software

설치안내



설치 안내

⚠ 설치 전 확인하세요.


Bluetooth로 LookinBody를 연결할 경우, LookinBody Bluetooth 동글(InBT400-USB 이상)을 꽂으세요.

설치 마법사의 안내가 있을 때까지 Hardlock Key를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂지 마세요.



Hardlock Key

or

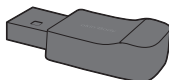

LookinBody
Bluetooth 동글
(InBT400-USB 이상)

* InBody 기기가 Bluetooth 연결을 지원하는 경우, 제공된 Bluetooth 동글이 Hardlock Key와 동일한 역할을 수행합니다.

설치 방법

인바디 홈페이지(inbody.com) > 고객센터 메뉴 > 자료실 > 소프트웨어에 접속하여 설치하고자 하는 파일을 다운로드 합니다.

재설치할 경우

PC를 포맷하거나 교체할 경우, LookinBody 삭제 전 프로그램을 실행하여 환경설정 > LookinBody 데이터 > 3.재설치 방법의 안내에 따라 재설치를 진행하세요.



LookinBody120은 인바디와 연동되는 회원관리용 PC 프로그램입니다.

LookinBody120을 이용하면 인바디 검사를 빠르고 간편하게 할 수 있으며, 회원과 검사 결과를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시스템 요구사항

운영체제: Window 10 (32bit/64bit) 호환

프로세서: 1.8 GHz 이상의 프로세서

하드디스크: 10 GB 이상의 여유공간

메모리: 4 GB RAM 이상

해상도: 1280 X 1024 이상

입력장치: 키보드, 마우스

통신방법: Serial(RS-232C), USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth

*상기 내용은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LookinBody 120에 문제가 있거나 임상관련 질문이 있다면 아래 연락처로 문의하세요.

(주)인바디 본사 [대한민국]

06106 서울시 강남구 언주로 625 인바디빌딩

TEL: 02-501-3939 FAX: 02-6919-2417

고객센터: 1899-5841

Website: inbody.com

E-mail: info@inbody.com





InBody





LookinBody120

Data Management Software

Installation Guide



Installation Guide


⚠ Check prior to installation

Do not plug in the Hardlock Key into the computer's USB port until instructed to do so by the installation wizard.



Hardlock Key

or

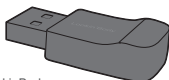

LookinBody
Bluetooth Dongle
(InBT400-USB or higher)

* If your InBody model supports Bluetooth connections, the supplied Bluetooth dongle will also act as the Hardlock Key.

Installation Steps for LookinBody120

Follow the steps below to set up the program:

1. Obtain the Installation File
Download the installation file provided by your supplier or vendor.
2. Follow the Installation Instructions
Carefully follow the detailed installation instructions for LookinBody120 to ensure proper setup.

Reinstalling LookinBody120

If you are reformatting or replacing your computer, follow these steps to reinstall LookinBody120.

1. Launch LookinBody120
Open the LookinBody120 application on your computer.
2. Access the Reinstallation Guide
Navigate to: [Setup] → [LookinBody Data Management] → [03. Reinstallation Guide]
3. Follow the Reinstallation Instructions
Complete the process by carefully following the on-screen instructions provided in the Reinstallation Guide.



System Requirements



Operating System: Windows 10 (32 bit/64 bit)

Processor: 1.8 GHz or faster processor recommended

Hard Disk: 10 GB or greater HDD free space

Memory: 4 GB RAM or greater

Resolution: 1280 X 1024 or higher

Input Device: Keyboard, Mouse, Trackpad

Connection Method: Serial (RS-232C), USB, LAN, Wi-Fi,
Bluetooth

* InBody Co., Ltd. reserves the right to modify the appearance, specifications, and etc. of LookinBody120 to improve the quality of the product, without prior notice for reasons of performance improvement.

**For any questions regarding
LookinBody120 or general questions,
contact:**

InBody Co., Ltd. [HQ]

InBody Bldg., 625, Eonju-ro, Gangnam-gu,
Seoul 06106 KOREA

TEL: +82-2-501-3939 FAX : +82-2-6919-2417

Customer Center: 1899-5841

Website: inbody.com

E-mail: info@inbody.com





InBody





LookinBody120

Data Management Software

Installation Guide **USA**



Installation Guide


Check prior to installation

Do not plug in the Hardlock Key into the computer's USB port until instructed to do so by the installation wizard.



Hardlock Key

or

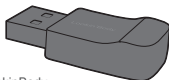

LookinBody
Bluetooth Dongle
(InBT400-USB or higher)

* If your InBody model supports Bluetooth connections, the supplied Bluetooth dongle will also act as the Hardlock Key.

How to Install

To install LookinBody 120, please use the download link provided and follow the on-screen instructions.

* Download link: <https://inbody.files.com/f/7d50b46beabe5afb>

If you are unable to install via the link, we can provide a USB with the installation files.

This is separate from the USB that contains the software license and Bluetooth function.

Reinstalling LookinBody120

If you are reformatting or replacing your computer, follow these steps to reinstall LookinBody120.

1. Launch LookinBody120
Open the LookinBody120 application on your computer.
2. Access the Reinstallation Guide
Navigate to: [Setup] → [LookinBody Data Management] → [03. Reinstallation Guide]
3. Follow the Reinstallation Instructions
Complete the process by carefully following the on-screen instructions provided in the Reinstallation Guide.



System Requirements



Operating System: Windows 10 (32 bit/64 bit)

Processor: 1.8 GHz or faster processor recommended

Hard Disk: 10 GB or greater HDD free space

Memory: 4 GB RAM or greater

Resolution: 1280 X 1024 or higher

Input Device: Keyboard, Mouse, Trackpad

Connection Method: Serial (RS-232C), USB2.0, LAN, Wi-Fi,
Bluetooth

* InBody Co., Ltd. reserves the right to modify the appearance, specifications, and etc. of LookinBody120 to improve the quality of the product, without prior notice for reasons of performance improvement.

**For any questions regarding
LookinBody 120,
contact:**

InBody USA [USA]

13850 Cerritos Corporate Dr. Unit C, Cerritos, CA 90703 USA

TEL: +1-323-932-6503 FAX: +1-323-952-5009

Website: inbodyusa.com

E-mail: info.us@inbody.com





InBody





LookinBody120

Data Management Software

インストール案内





必要システム構成



OS: MS Windows 10/11(32 bit/64 bit)互換

CPU: 1.8 GHz以上(3.0 GHz Core-i5以上を推奨)

HDD: 10 GB以上の空き容量

RAM: 4 GB以上(8GB以上を推奨)

解像度: 1280×1024以上

入力装置: キーボード、マウス

通信方法: USB/Serial(RS-232C)/LAN/Wi-Fi/Bluetooth

* 製品改良のため仕様・デザインは予告なしで変更することがありますのでご了承ください。

LookinBodyに何らかの問題が生じたり、臨床に関する質問があったりした場合、下記の連絡先までお問い合わせください。

株式会社インボディ・ジャパン [JAPAN]

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル

Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781

Website inbody.co.jp

E-mail inbody@inbody.co.jp





インストール案内



⚠ インストール前に確認してください。

LookinBodyをインストールする前に、ハードロックキーをパソコンのUSBポートに差し込まないでください。必ずハードロックキーはLookinBodyをインストールする際の案内に従って差し込んでください。

インストール方法

本CDをCD-ROM装置に入れると、インストールプログラムが自動的に実行されます。プログラムの案内に従って、インストールを進めてください。

インストールプログラムが実行されない場合

インストールプログラムが自動的に実行されない場合、手動で実行することができます。CD-ROMから、「LookinBody120_Setup.exe」ファイルを実行してください。

再インストールする場合

パソコンをフォーマットしたり交換する場合、既存のパソコンにインストールされているLookinBodyの環境設定、「再インストールガイド」の案内に従って、再インストールを進めてください





製品保証書



本書は、(株)インボディ・ジャパンの製品を下記のように保証します。

1. 本製品は、徹底的な品質管理による厳密な検査過程を通過した製品です。
2. 本製品の無償保証期間は製造元の無償保証期間の処理方針に従います。
3. 正常な使用状態で故障が発生した場合、保証期間中は無償で処理致します。
4. 次のような場合は、無償保証期間中でも有償サービスとなります。
 - ・ ユーザーの故意又は過失によるプログラムの損傷
 - ・ ユーザーのパソコンにより発生した故障及び損傷
5. 次のような製品の内容変更及び損傷が発生した場合はサービスを受けることができません。
 - ・ 製品の分解
 - ・ LookinBodyソフトウェアの無断変更
 - ・ 弊社の技術者以外による製品の修理
6. 保証期間満了後は製品保守契約及び修理要請により有償サービスを受けることになります。故障及び損傷が発生した場合は、(株)インボディ・ジャパンまたはご購入された代理店に修理をご依頼ください。

製品名 _____

ご購入日 _____

製品番号 _____

ご購入先 _____

InBody

株式会社インボディ・ジャパン





使用許諾条件書



本文は、本製品をお客様に使用していただく前提となる条件を記載したものです。本製品のインストールを実行する前に、まず本文をよくお読みください。

本文にご同意していただけない場合には、本製品の複製またはインストール等の使用を実行せず、ご購入後30日以内に領収書と共に、弊社にご返却ください。製品代金を返金いたします。本製品の複製またはインストールを実行された後は、第5条に定める他は返金・交換には応じられませんので、ご了承ください。本製品の複製またはインストール等の使用を実行された場合には、本文に同意したものとみなされますので、ご了承ください。本文にご同意頂いたお客様は、弊社指定の方法でユーザー登録をすることをおすすめします。

第1条（使用許諾等）

弊社は、お客様が本文に同意し遵守されることを条件として、本製品中のソフトウェア（以下「本ソフトウェア」）を日本国内で使用する権利をお客様に許諾いたします。また、本製品に同梱する本ソフトウェアに関するマニュアル等の印刷物（以下、「本マニュアル等」）については、お客様が本文に同意し遵守されることを条件としてお客様に譲渡いたします。弊社は、本ソフトウェアおよび本マニュアル等に関する著作権その他の知的所有権をお客様に譲渡するものではありません。

第2条（使用条件）

弊社は、本製品1ライセンスにつきユーザー1名のコンピュータ1台に限り、本ソフトウェアをインストールして使用することを許諾いたします。ただし、ユーザー1名で、且つ複数のコンピュータによる同時使用を行わない場合には、複数台のコンピュータでの本ソフトウェアをインストールして使用することを許諾いたします。複数台のコンピュータによる同時使用を行う場合、ハードロックキーの購入による追加インストールは本製品1ライセンスにつき、ユーザー1名のコンピュータ5台まで本ソフトウェアをインストールして使用することを許諾いたします。





第3条 (禁止事項)

お客様が、以下の各号の行為を行うことは禁止いたします。

1. 本ソフトウェアをバックアップの目的以外で複製すること
2. 本ソフトウェアの改変・結合・リバースエンジニアリング（逆アセンブル等）・解析等
3. 本製品または複製物（本条第1号の目的で複製したか否かを問わない）を譲渡すること（ただし、弊社の承認する者を除く）
4. 本ソフトウェアを使用して他ソフトウェアを個人利用の範囲を超えて無断複製および無断使用すること
5. 本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること

第4条 (有効期間)

1. 本文の効力は、お客様が本製品の複製またはインストール等の使用を行なった時点で発生するものとします。
2. お客様が、本文のいずれかの条項に違反した場合、または弊社の著作権その他の知的所有権を侵害した場合には、弊社はお客様への使用許諾を解除することができます。
3. 前項によりお客様の使用許諾が解除された場合には、本製品を速やかにアンインストールし、CD-ROM等の記録媒体を破棄するかお客様のご負担で弊社に返却するものとします（弊社の指示があればこれに従うものとします）。

第5条 (保証範囲)

1. 本製品の選択および使用効果については、お客様の責任とさせていただきます。また、弊社は本条以外には、本製品・本マニュアル等、および本条第4項のサポート・サービスに関して一切の保証責任または瑕疵担保責任を負わないものとします。
2. 弊社は、本製品にプログラムの使用上支障となる物理的欠陥があり、弊社が当該欠陥につき弊社の責に帰すべき事由があることを確認した場合には、ご購入日から90日以内に限り、無料で別の本製品と交換いたします。





3. 弊社は、本ソフトウェアのプログラムに誤り（バグ）があることを弊社が確認し、当該製品の販売中、および販売終了後3年までの間に弊社が当該誤り（バグ）を修正した場合には、ユーザー登録のあるお客様に対し修正したソフトウェアまたは修正に関連する情報を提供します。ただし、修正したソフトウェアまたは修正に関連する情報を提供することの要否・時期および提供手段等については、弊社にて定めさせていただきます。修正したソフトウェアにも本文が適用されるものとします。
4. 弊社がお客様またはその他の第三者に損害賠償責任を負う場合には、どのような場合でも、賠償額の上限は本製品の代金相当額とします。

第6条（その他）

1. 本文は日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本使用許諾の条件については、法規の訂正、または弊社の事情によって弊社が変更することがあり、お客様はそれに同意するものとします。変更については、弊社のホームページに表示します。
3. 本製品および本文に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

株式会社インボディ・ジャパン [JAPAN]

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル

Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781

Website inbody.co.jp

E-mail inbody@inbody.co.jp





InBody





LookinBody120

Data Management Software

安装指南



安装指南

! 安装前确认事项。

通过蓝牙连接LookinBody时, 请插入LookinBody蓝牙模块 (InBT400-USB或更高版本)。

在出现安装向导提示之前, 请勿将Hardlock Key插入电脑的USB端口。



Hardlock Key

or



LookinBody
蓝牙模块
(InBT400-USB或更高版本)

* 如果 InBody 设备支持蓝牙连接, 蓝牙模块将起到与 Hardlock Key 相同的作用。

安装方法

前往“InBody售后服务”公众号>应用下载>软件安装包进行下载, 或通过联系销售人员, 为您安装软件。

重新安装方法

重新安装之前, 请先运行LookinBody删除前的程序, 通过设置>LookinBody数据>3. 重新安装方法的指引进行重新安装。



LookInBody120是配合InBody使用的 会员管理用PC软件。

使用LookinBody120有助于更好地应用InBody人体成分分析仪，
有效管理会员与测试结果。



系统要求

运行系统: Window 10 (32bit/64bit)兼容

处理器: 1.8 GHz以上的处理器

硬盘: 10 GB以上的剩余空间

内存: 4 GB RAM 或更高

分辨率: 1280 X 1024 或更高

输入设备: 键盘, 鼠标

通信方式: Serial(RS-232C), USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth

* 为提高性能, 上述内容有可能在未预先告知的情况下进行变更。

**若对LookinBody120存在疑问, 或有关
于使用方面的问题, 可通过以下方式
联系我们。**

生产商: InBody Co., Ltd. [韩国]

地址: InBody Bldg., 625, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea

售后服务: 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司
[代理人及售后服务] [CHINA]

电话: 021-64439705 传真: 021-64439706

客户服务中心: 400-888-5363

网站: inbodychina.com

电子邮件: info@inbodychina.com









InBody

©2025 InBody Co., Ltd. All rights reserved. IM-I1-D-25xxxx

